

最高温度 260℃仕様の乾熱恒温器  
スリムな省スペース型と  
使いやすいワイド型が選べます。

乾熱恒温器

LB

# DON-M series

容量300～648ℓの4タイプ。  
自然対流式と熱風循環式も選べ  
全6機種をご用意。

自然対流式

DON-600MH/800MH

DON-1000MIV/1200MIV

熱風循環式

DON-1000MIVF/1200MIVF



DON-600MH



DON-800MH



DON-1200MIV

# 容量300～648ℓのスリム型とワイド型 最高温度260℃、自然対流式と熱風循環式をご用意。

## 主な特長

### ■容量 300ℓ～648ℓのスリム型とワイド型

DON-600MHと800MHはスリムな省スペース型で、しかも使いやすい容量サイズです。また、DON-1000MIV/MIVF、1200MIV/MIVFはサイドパネルで使いやすいワイド型です。

### ■定値運転、プログラム運転

定値・定時間運転の他に、最大8ステップまでの温度・時間を設定したプログラム機能付で、プログラム運転、繰り返し運転などができます。

### ■トラブル時にも安心な各種安全装置

温度過昇防止装置は、運転設定温度+10℃に自動設定される回路と運転設定温度+30～+50℃に設定するダイヤル式温度調節器の二重となります。また、温度設定値上限設定や漏電ブレーカー、ヒーター及びセンサー断線警報などを搭載しています。


### ■最高温度 260℃、自然対流式と熱風循環式

各機器とも内槽の外側に中間通気槽を設け、槽内の対流を促進させて温度分布の向上をはかっています。更にFタイプは、ファンモーターによる熱風循環式を採用し温度分布の向上をはかり、効率的な乾燥・排気機能を備えています。

自然対流式：DON-600MH/800MH

DON-1000MIV/1200MIV

熱風循環式：DON-1000MIVF/1200MIVF

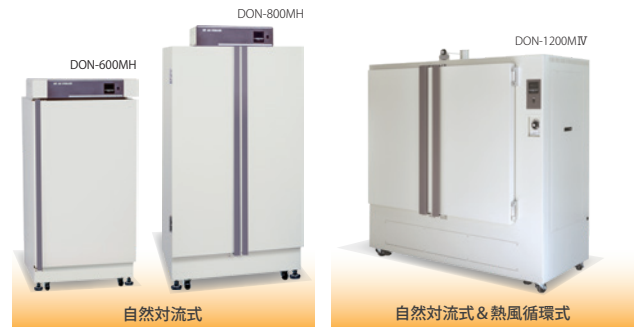

## 規格・仕様

乾熱恒温器 DON-M series						
型 式	DON-600MH	DON-800MH	DON-1000MIV	DON-1200MIV	DON-1000MIVF	DON-1200MIVF
医療/理化学機器の分類	<b>LB</b>					
内寸法	W600×D500×H1000 mm	W800×D500×H1200 mm	W1000×D600×H700 mm	W1200×D600×H900 mm	W1000×D600×H700 mm	W1200×D600×H900 mm
庫内容量	300ℓ	480ℓ	420ℓ	648ℓ	420ℓ	648ℓ
棚板数(耐荷重)	4枚(15kg/枚)	4枚(20kg/枚)	2枚(30kg/枚)	3枚(30kg/枚)	2枚(30kg/枚)	3枚(30kg/枚)
使用温度範囲	50～260℃					
温度分布精度※1	±6℃(at 200℃、中心部、上中下3点、無負荷時)				±4℃(at 200℃、中心部、上中下3点、無負荷時)	
制御方式	温度：3桁デジタルPID制御 時間：1～99時間59分、プログラム機能付					
対流方式	自然対流式			熱風循環式		
安全装置	自動過昇防止機能・独立過昇防止装置・ヒーター断線検出・温度設定値上限設定・センサー異常検出機能・モーター保護用サーマルリレー(DON-MIVF型のみ)・ファン保護機能(DON-MIVF型のみ)・過電流・漏電ブレーカー					
内槽材質	ステンレス鋼板(SUS443J1)					
外寸法	W822×D727×H1554 mm	W1034×D727×H1754 mm	W1450×D773×H1665 mm	W1650×D773×H1687 mm	W1450×D773×H1665 mm	W1650×D773×H1687 mm
重 量(約)	130 kg	160 kg	160 kg	230 kg	165 kg	235 kg
電 源	単相AC200V 2.0kW 10A	単相AC200V 3.2kW 16A	単相AC200V 2.8kW 14A	単相AC200V 3.6kW 18A	単相AC200V 3.0kW 15A	単相AC200V 3.8kW 19A
電源接続部形状	丸端子  3m					
価 格(税別)	¥770,000	¥1,120,000	¥1,243,000	¥1,688,000	¥1,423,000	¥1,842,000

※電源コードは圧着丸端子付になります。プラグが付属されておりませんので、ご準備願います。 ※本体の測定孔は、内径φ23mmを設けています。

※1 温度分布精度は室温23℃±5℃での値です。

## LB 理化学機器(LABO)

代理店

※表示価格は、全て税別価格になります。 ※価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。

## 株式会社 平山製作所

<http://www.hirayama-hmc.co.jp/>

本 社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384  
 大 阪 支 店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062  
 仙 台 事 務 所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688  
 福 岡 事 務 所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7(ヤガミ福岡ビル) TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870  
 サービスセンター 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384

●サービス拠点 札幌、青森、大阪、広島



ISO 13485 認証取得  
本社 / サービス / 工場