

オートクレーブ(医療機器) / 高圧蒸気滅菌器

管理医療機器クラスII / 特定保守管理医療機器

消臭機能付ハイクレーブ HVN-II series

滅菌の二オイ・蒸気で、もう悩まない。
消臭機能を搭載した次世代型オートクレーブ



ISO 13485
認証取得

このカタログの製品は、ISO13485の
認証を受けた会社で製造した製品です

より安心、確実な医・理化学機器をめざす

ヒラヤマ

消臭機能付ハイクレーブ

HVN-II series


不快なニオイと蒸気を抑える消臭機能付オートクレーブ

管医Ⅱ HVN-50Ⅱ/85Ⅱ

有効容量 50ℓ / 85ℓ



見やすい・わかりやすい・使いやすい
便利なカラータッチパネルを搭載

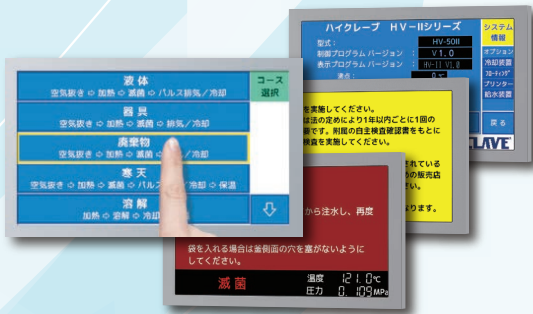

HVN-50 II

HVN-85 II




独自の優れた消臭効率&コストパフォーマンス

加熱中や滅菌後の取り出し時に立ち込める不快なニオイのもととなる蒸気を抑え、更に消臭フィルターで抑制します。消臭フィルターの交換目安は年1回※の為、専用消臭剤よりも経済的です。

※一日1回使用時目安。使用頻度や環境により変化します。

ニオイの発生ポイントで不快な臭いを測定。
各ポイントで優れた消臭効率が証明されました。
(データ値はHVN-50Ⅱの社内試験による)

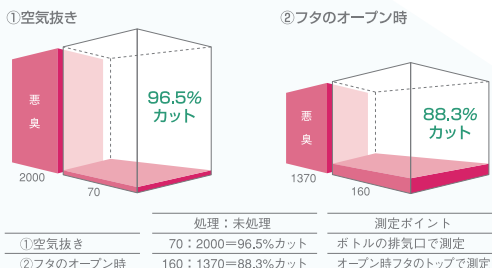

被滅菌物の臭いを取り除くものではありません。
被滅菌物の種類によっては、臭いがわずかに残ることがあります。



強制冷却ファンを標準装備

滅菌完了後の缶体をファンで急速冷却します。



簡単・確実。自社開発のロックシステム

レバーをスライドするだけでフタを確実にロック。ハンドル型の従来機種と比べ、短時間で力を入れずにロックできます。
(エレクトロ・メカニカル・ロックシステム)



危険を感知。ダブルインターロック

缶内の危険要素「高温」・「圧力」を検知。缶内が大気圧(0MPa)、フタロック解除温度以下でロックを解除します。

[規格・仕様]

型 式	HVN-50Ⅱ	HVN-85Ⅱ
医療/理化機器分類	管医Ⅱ 管理医療機器(クラスⅡ) 医療機器認証番号 231A4BZX00001000 特定保守管理医用機器	
缶体内寸法(φ×D mm)	300×710	420×615
有効容量	50ℓ	85ℓ
選択コース	液体・器具・廃棄物・寒天・溶解 / 8×モリー	
滅菌温度範囲	105～135℃ 可変式	105～128℃ 可変式
最高使用圧力	0.255MPa	0.196MPa
外寸法(W×D×H mm)	547×532×1046	667×652×1026
重 量(約)	65 kg	93 kg
電 源	AC100V 2.0kW (20A)	単相 AC200V 4.0kW (20A)
電源接続部形状	丸端子 3m	丸端子 3m
付属品	スノコ・排気ボルト・排水ホース・排気ホース・ドレン回収ボルト インシュロック・キャストーストップ(2個)	
価 格(税別)	¥770,000	¥1,070,000

※外寸法：外寸法のD寸法には、フタ開閉スライドレバーは含まれていません。

※丸端子には、プラグが付属されておりません。別途ご用意ください。

※HVN-50Ⅱの電源設備は、AC100V 30A以上を推奨します。

製品には金網カゴは付属されていません。
推奨品：ステンレス製丸型金網カゴ
HVN-50Ⅱ：φ270×H220mm ¥13,000
φ270×H270mm ¥14,000
HVN-85Ⅱ：φ380×H285mm ¥23,000

■消耗品
HVN用の消臭フィルター
HVN-50Ⅱ 1本装着 ¥13,000
HVN-85Ⅱ 2本装着 ¥18,000 / 1本



システムアップのオプション機器

- ・レコーダー(6打点、センサー1本付) ¥500,000(校正費別途)
- ・温度センサーT型熱電対(品温/雰囲気) ¥30,000(校正費別途)
- ・プリンター ¥123,000
- ・フローティングセンサー ¥62,000(校正費別途)

ISO 13485 認証取得

株式会社 平山製作所

本 社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5

大阪支店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1

仙台事務所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101

TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384

TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062

TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688

福岡事務所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル)

サービスセンター 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5

ホームページアドレス <http://www.hirayama-hmc.co.jp>

TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870

TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384

●サービス拠点 札幌・青森・大阪・広島

A.19.06.10.HIR